

# Urinuntersuchung beim Kleinsäuger – so einfach und doch so aussagekräftig

Jutta Hein

Obwohl die Urinuntersuchung beim Kleinsäuger einfach und kostengünstig durchzuführen ist, wird sie doch viel zu selten in der Praxis genutzt. Dabei liefert sie schnell Antworten sowohl auf typische Fragen (z. B. Blut im Urin oder Kalziumstatus) als auch auf überlebenswichtige prognostische Fragen (wie Nierenfunktion und Säure-Basen-Haushalt) und kann Hinweise auf systemische Krankheiten geben (z. B. Diabetes mellitus und Ketoazidose).

## Uringewinnung

Auch bei Kleinsäufern kann Urin durch verschiedene Methoden gewonnen werden:

- Auffangen freiwillig abgesetzten Urins
- Auffangen nach manuellem Ausdrücken der Blase
- Katheterisierung
- Zystozentese

Welche Methode wann gewählt wird ist von der Fragestellung abhängig (► **Tab. 1**), das benötigte Material zur Urinentnah-

me und -untersuchung ist in ► **Abb. 1** dargestellt.

### Auffangen ohne Manipulation

Das Tier wird in eine Box mit nicht saugfähiger Perlstreue oder alternativ in eine Box mit Gitterboden über einer sauberen Schale gesetzt. Der Gitterboden verhindert eine Kontamination des Urins mit Kot oder durch Durchlaufen.

### Auffangen nach Ausdrücken der Blase

Der Oberkörper des Tieres wird angehoben und der Blaseninhalt aufgeschüttelt und sanft ausmassiert (Vorsicht bei übervoller Blase und/oder Verdacht auf Verschluss), ► **Abb. 2**. Die Mittelportion ist am repräsentativsten für den Gesamturin, die Anfangsportion eher für die ableitenden Wege.

### Katheterisierung

Die Katheterisierung erfolgt möglichst steril mittels eines Katerkatheters oder einer schmalen Ernährungssonde. Das Tier befindet sich in Rückenlage, ggf. ist eine Sedation notwendig.

### Zystozentese

Das Tier wird in Rückenlage fixiert, die Punktion erfolgt im Winkel von 30°–45° mit einer kleinen Kanüle (22 G). Die Zystozentese kann blind durch Fixation der Blase zwischen den Fingern (► **Abb. 3**) oder unter Ultraschallkontrolle durchgeführt werden.

## Vorbereitung der Urinprobe

Die Urinproben werden in sterilen Röhrchen aufgefangen und möglichst rasch untersucht. Da es besonders bei höheren Temperaturen schnell zur Dissoziation von Zylindern, osmotischer Zellschädigung, Präzipitation von Kristallen und pH-Änderung kommt, sollte Urin nicht länger als 30 Min. bei Zimmertemperatur und maximal 48 Stunden im Kühlschrank (+4°C) gelagert werden. Vor der Untersuchung wird der Urin wieder auf Raumtemperatur gebracht, da manche Tests – z.B. Teststreifen und urinspezifisches Gewicht (USG) – temperaturabhängig sind und Kältepräzipitate sich erst wieder auflösen müssen [10].



**Abb. 1** Material zur Urinentnahme (Auffangschale, sterile Spritze mit Kanüle [22G], sterile Röhrchen mit und ohne Stabilisator), Urinteststreifen, Refraktometer, Objektträger für die Sedimentuntersuchung.



**Abb. 2** Manuelle Blasenentleerung beim Kaninchen.

Tab. 1 Uringewinnung.

Methode	Vorteile	Nachteile	Geeignet	Nicht geeignet
<b>Auffangen ohne Manipulation</b>	keine Manipulation notwendig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ggf. zeitaufwendig</li> <li>• Kontamination durch harnableitende Wege und Umgebung</li> <li>• unvollständige Blasenentleerung (ggf. Unterschätzung der Kristallurie)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• makroskopische Untersuchung (Blut, Beimengungen, Ca)</li> <li>• USG</li> <li>• Urinteststreifen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spezielle Nieren- und Blasenbeurteilung</li> <li>• Sediment</li> <li>• BU</li> </ul>
<b>Auffangen nach Ausdrücken der Blase</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• schnell und einfach</li> <li>• bei Kleinsäufern geringe Gefahr von Ruptur und Rückstau in das Nierenbecken</li> <li>• gute Durchmischung und Entleerung der Blase</li> <li>• Beurteilung von Nierenfunktion und Stoffwechsel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontamination durch harnableitende Wege und Umgebung</li> <li>• Blutbeimengungen durch Läsionen v. a. bei Kristallurie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• makroskopische Untersuchung (Beimengungen, Ca, nicht für Blut!)</li> <li>• USG</li> <li>• Urinteststreifen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spezielle Nieren- und Blasenbeurteilung</li> <li>• Sediment</li> <li>• BU</li> </ul>
<b>Katheterisierung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfung der Harnröhrendurchgängigkeit</li> <li>• Blasenpülung und retrograde Eingabe (Kontrastmittel, Medikamente)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• schwieriger bei weiblichen Kaninchen (gemeinsamer Urethra- und Vaginalausgang) und männlichen Meerschweinchen (große Samenblasendrüsen)</li> <li>• Gefahr der Einschleppung von Keimen in die Blase und der Schleimhauttraumatisierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• makroskopische Untersuchung (Beimengungen, Ca, nicht für Blut!)</li> <li>• USG</li> <li>• Urinteststreifen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• reine Nieren- und Blasenbeurteilung</li> <li>• Sediment</li> <li>• BU</li> </ul>
<b>Zystozentese</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• schonende Gewinnung sterilen Blasenurins für BU</li> <li>• Entleerung der Blase bei Harnröhrenverschluss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruptur bei übervoller Blase möglich</li> <li>• geringe Blut- und somit auch Proteinbeimengungen durch die Punktion</li> </ul>	alle Untersuchungen	Nachweis von Blutspuren

Für die Untersuchung von Urinstatus und Sedimentes ist frischer, nativer Urin (**unbehandeltes, steriles Röhrchen**) am besten geeignet. Urinproben für die mikrobiologische Untersuchung sollten in **Stabilisatorröhrchen** (Röhrchen mit Borsäurepulver) verschickt werden.

**.konkret**

Urin sollte nicht länger als 30 min bei Zimmertemperatur und max. 48 h im Kühlschrank (+4°C) gelagert werden.

Für die Urinuntersuchung stehen folgende Methoden zur Verfügung:

- **Urinstatus** (makroskopische Untersuchung, USG, Urinteststreifen)
- **Sedimentuntersuchung**
- **bakteriologische Untersuchung (BU)**
- Untersuchung auf **andere Infektionserreger** (z. B. *E. cuniculi*-Sporen, Leptospiren)
- Bestimmung von bestimmten **klinisch-chemischen Parametern**

(z. B. Urin-Kortisol/Kreatinin-Quotient [UCC], Urin-Protein/Kreatinin-Quotient [UPC]).

**Urinstatus**

**Makroskopische Urinuntersuchung**

Die makroskopische Urinuntersuchung gibt bereits erste wesentliche Hinweise auf Nierenfunktion und Hydratationsstatus (Konzentration und Farbe), auf Stoffwechselfunktion und Säure-Basen-Haushalt (Geruch) und auf fütterungsbedingte und/oder krankhafte Beimengungen (Blut, Kalzium, Eiter etc.).

**Farbe**

Bei gesundem Urogenitaltrakt sollte ein gut konzentrierter (kräftig gelb gefärbter) Urin abgesetzt werden (► **Abb. 4**). Schwach gefärbter Urin spricht für Polyurie (Verifizierung durch Bestimmung des USG). Bestimmte Medikamente, Futterfarbstoffe und andere Pigmente aus dem endogenen Abbau (Gallepigmente, Porphyrine, Melanin etc.) können die

Harnfarbe erheblich beeinflussen (Nachdunkeln, Fehlinterpretation als Blut, ► **Abb. 5**).

**Geruch**

Physiologischer Urin sollte aromatisch riechen. Bestimmte Medikamente, Futterfarbstoffe und andere Pigmente aus dem endogenen Abbau können den Geruch beeinflussen (z. B. „Spargelgeruch“). Ein stechender Geruch deutet auf eine Infektion hin, ein fruchtiger Geruch ggf. auf eine Ketose.

**Trübung**

Eine Trübung entsteht durch Beimengungen (Kristalle, Schleim, Eiter, Blut, Epithelien, Bakterien). Eine geringgradige Beimengung von Kalziumkristallen wird bei Kaninchen und Meerschweinchen noch als physiologisch angesehen (nahrungsabhängige Aufnahme und renale Elimination). Diese Kristalle entstehen durch eine übermäßige Kalziumzufuhr und/oder eine Störung des Kalziumstoffwechsels (Hyperparathyreoidismus [2],



Abb. 3 Zystozentese beim Meerschweinchen (blind).

Osteodystrophia fibrosa [9]). Für die Ausfällung sind unterschiedlichste Faktoren verantwortlich, wie die Anwesenheit von Kristallisationskernen, der pH-Wert, Schleimhautschäden, genetische Prädisposition, Flüssigkeitsaufnahmemenge, Grundkrankheiten etc. Sind zudem Infektionen und/oder entsprechende Milieuveränderungen vorhanden, ist auch die Entstehung von Steinen möglich [12]. Starke Kristallansammlungen und Verfärbungen sollten daher in jedem Fall weiter abgeklärt und therapeutisch (und v. a. diätetisch) angegangen werden.

### Urinspezifisches Gewicht (USG)

Das USG zeigt die Konzentration löslicher Stoffe im Urin an und gibt Hinweise auf die Rückresorptionsfähigkeit des Tubulussystems und somit die **Konzentrationsfähigkeit der Nieren**. Die Bestimmung erfolgt mittels **Refraktometer**. Teststreifenmethoden sind aufgrund ungeeigneter Meßbereiche (1000–1025) und schlechter Vergleichbarkeit nicht geeignet [1].

Bei physiologischer Nierenfunktion besteht eine umgekehrte Proportionalität zwischen Konzentration und Urinmenge, d. h. bei geringer Urinmenge ist eine hohe Konzentration zu erwarten und umgekehrt [10]. Bei einem gesunden Kleinsäuger mit intakter Nierenfunktion sollte das USG oberhalb des isostenurischen Bereichs (1008–1016) liegen. Den konzentriertesten Urin der Kleinsäuger haben Hamster und Wüstenrennmäuse mit einem USG von über 1040. Bei Kaninchen und Meerschweinchen wird häufiger ein niedrigeres USG (meist <1025) verzeichnet. Dies ist durch Kalzurie, leichte Infektionen und entsprechende



Abb. 4 Urine mit unterschiedlicher Färbung.

Interferenz an den ADH-Rezeptoren der Sammelrohre bedingt. Bei starker Urintrübung sollte der Überstand nach kurzem Stehenlassen verwendet werden.

### Urinteststreifen

Urinteststreifen (► Tab. 2) sind semi-quantitative Trockenchemiesysteme zur Bestimmung verschiedener Parameter. Die Durchführung ist schnell und einfach. Die Teststreifenfelder werden mit Urin beträufelt und nach 60 Sekunden (Leukozytenfeld nach 120 Sekunden) abgelesen. Die Auslesung erfolgt visuell und/oder maschinell mit entsprechenden Leseegeräten. Ergebnisse unterschiedlicher Tests und Ausleseverfahren können stark variieren [1].

Urinteststreifen liefern gerade bei kritischen Patienten bereits in der Praxis schnell und einfach **erste Aussagen über Stoffwechsellage und Säure-Basen-Haushalt** des Tieres (pH-Wert, Glukose, Ketonkörper), geben Hinweise auf Infektionen (Leukozyten, Nitrit) und ermöglichen die Unterscheidung von Urinverfärbungen (Blut, Hämoglobin, Myoglobin, Bilirubin oder andere Farbstoffe). Im Idealfall sollten die Urinteststreifenfelder (mit Ausnahme des pH-Wertes) negativ ausfallen.

Der **pH-Wert** richtet sich nach der Tierart, der Nahrung und dem Gesundheitszustand. Kleinnager haben zumeist einen **leicht alkalischen Urin**. Diäten mit hohem Gehalt an tierischen Proteinen und katabolische Störungen (z. B. Hunger, Ketose und Fieber) führen zu einer Ansäuerung, pflanzliche Diäten zu einer Alkalisierung [3].



Abb. 5 Nachdunkeln von Urin durch Futterfarbstoffe.

Aufgefangener Urin ist häufig bakteriell kontaminiert, was positive Befunde vortäuschen kann. Besteht laut Urinteststreifen Verdacht auf eine bakterielle Zystitis (**Leukozyten, Nitrit**), sollte das Ergebnis durch eine Sedimentuntersuchung aus Zystozenteseurin verifiziert und – spätestens bei einem Rezidiv – die Keimart und ihre Empfänglichkeit mittels bakteriologischer Untersuchung und Antibiotogramm bestimmt werden.

Der **Proteingehalt** im Urin korreliert mit dem **Blutgehalt** und dieser wiederum mit der Art der Uringewinnung. Bei Blasenmanipulation steigt der Blutgehalt (Ausdrücken: 1+ bis 4+ Blut; Zystozentese und Katheterisierung: meist 1+ Blut) und muss entsprechend kritisch bewertet werden.

**Glukose** kann bei kurzzeitigen Blutglukoseschwankungen (Nahrung, Stress, Östrus) im Urin vorgefunden werden. Der Nachweis von Glukose kann aber auch ein Hinweis auf eine pathologische Hyperglykämie oder Niereninsuffizienz sein und sollte daher kontrolliert und mittels Glukose- und Fruktosaminmessung im Blut verifiziert werden.

Der Nachweis von **Ketonkörpern** im Urin (nur Azeton und Acetessigsäure) weist auf eine schwerwiegende Stoffwechsellage hin. Die Ursache kann eine Mangelsituation („Hungerketose“) oder wie oft beim Kaninchen eine kurzzeitige Hyperglykämie („diabetische Ketoazidose“) sein. Eine Hypoglykämie konnte bei einer Studie an 907 Kaninchen nur bei 1,4% festgestellt werden [5]. Die Therapie ist entsprechend abhängig von der Glukosekonzentration in Blut.

**.konkret**

Für die Bestimmung des urinspezifischen Gewichts sind Urinteststreifen nicht geeignet [1].

Da auch Medikamente und Desinfektionsmittel Einfluss auf die Testfelder haben können und so immer sowohl falsch-positive als auch falsch-negative Ergebnisse möglich sind, sollten unplausible Ergebnisse immer durch entsprechende weiterführende Untersuchungen

(Sedimentuntersuchung, Blutuntersuchung, Ultraschall) verifiziert werden [1, 10].

**Sedimentuntersuchung**

Die Sedimentuntersuchung ermöglicht eine mikroskopische qualitative und quantitative Bestimmung von:

- Zellen
- Zylindern
- Kristallen
- Mikroorganismen (Bakterien, Hefen etc.)

- anderen Beimengungen (z.B. Farbstoffe, Präzipitate, Zellreste etc.)

Die Uringewinnungsmethode ist hierbei abhängig von der Fragestellung (z. B. Blutung: freiwillig abgesetzter Urin; Verdacht auf bakterielle Zystitis: Zystozenteseurin, ► **Tab. 1**). Zur Sedimentherstellung wird der Urin in einem sterilen Röhrchen (ohne Stabilisator) ca. **5 Minuten bei 400 g (z.B. 1500 U/min. bei 15 cm Radius)** zentrifugiert (höhere Umdrehungen zerstören die Zylinder) und der Überstand weitgehend abgossen.

Tab. 2 Urinteststreifenparameter.

Parameter	Einflüsse	Aussage
<b>Bilirubin</b>	<b>Falsch positiv:</b> Färbung durch Farbstoffe und Gallepigmente <b>Falsch negativ:</b> Teststreifenfehler	Nur wasserlösliches, konjugiertes Bilirubin; Kopplung an Dichloranilin Hinweis auf Hyperbilirubinämie (prä-, intra- oder posthepatisch), bei Kleinsäufern selten
<b>Blut</b>	<b>Falsch positiv:</b> selbst verursachte Blutung durch Uringewinnung, Reaktion auf Hämoglobin, Erythrozyten und Myoglobin, körperliche Aktivität, Vit. C <b>Falsch negativ:</b> Teststreifenfehler, starke Trübung	Oxydation von Hydroperoxid durch Hämoglobin/Myoglobin Abhängig von der Art der Uringewinnung (Anzahl der Ausdrückversuche, Zystozentese etc.)
<b>Glukose</b>	<b>Falsch positiv:</b> Teststreifenfehler <b>Falsch negativ:</b> hohe Ketonkörperkonzentration, Vit. C	Glukoseoxidase-Peroxidase-Methode Hinweis auf Hyperglykämie (auch kurzzeitig iatrogen oder physiologisch) oder verminderte Rückresorptionskapazität der Nieren Positive Befunde sollten durch eine Blutuntersuchung (Glukose, Fruktosamin) bestätigt werden
<b>Ketonkörper</b>	<b>Falsch positiv:</b> Interaktion mit Sulfhydryl, Phenylketonen, Phthaleine; Spuren ggf. noch physiologisch <b>Falsch negativ:</b> Teststreifenfehler, Überwiegen von Buttersäure, starke Trübung	Probe nach Legal; nur Acetessigsäure und Aceton, keine B-Hydroxybuttersäure Hinweis auf gestörten Energiestoffwechsel (Hyper- oder Hypoglykämie) Beurteilung nur gemeinsam mit pH-Wert und Glukosekonzentration
<b>Leukozyten</b>	<b>Falsch positiv:</b> Konservierungsmittel, Antibiotika (Imipenem, Meropenem, Clavulansäure); Überdeckung bei starker Färbung <b>Falsch negativ:</b> Bilirubin, Nitrofurantoin, Glukose, Protein, Antibiotika (Cephalexin, Gentamycin)	Nachweis der Esteraseaktivität von Granulozyten (intakte und lysierte Leukozyten) Positive Befunde sollten durch Sediment bestätigt werden
<b>Nitrit</b>	<b>Falsch positiv:</b> Trübung <b>Falsch negativ:</b> nicht-nitritbildende Bakterien (oft), zu kurze Verweildauer des Urins in der Blase (ideal Morgenurin), Antibiotikatherapie innerhalb der letzten 3 Tage	Griess'sche Probe – Nitritnachweis (indirekter Nachweis nitrat-abbauender Bakterien ( <i>E. coli</i> etc.) Positive Befunde hinweisend
<b>pH-Wert</b>	Abhängig von Fütterung und Lagerung sauer = proteinreiche Nahrung alkalisch = pflanzliche Nahrung und Lagerung (Temperatursenkung, Urease-bildende Bakterien)	Nachweis von Hydroniumionen Hinweisend auf Säure-Basen-Haushalt und Stoffwechselsituation
<b>Protein</b>	<b>Falsch positiv:</b> alkalischer Urin, Interaktion mit Desinfektionsmittel, Chlorhexidin <b>Falsch negativ:</b> sehr dünner und sauer Urin	Proteinreaktion des pH-Indikators (sensitiv auf Albumin) Abhängig von Gewinnungsart (Blutbeimengung), Grad der Hämaturie und Urinkonzentrierung (USG) Hinweis auf renale, urogenitale oder andere Proteinbeimengung (Blut, Hb, Myoglobin), ggr. Mengen auch bei Fieber, Hypo-/Hyperthermie, Stress, Anstrengung
<b>Urobilinogen</b>	irrelevant beim Tier	Diazoniumsalzreaktion Keine klinische Bedeutung beim Tier

Ein Tropfen des resuspendierten Sediments wird auf einen Objektträger gegeben, mit einem Deckglas abgedeckt und bei geschlossener Irisblende oder heruntergeklapptem Kondensator mikroskopiert (400×). Zur besseren Zelldifferenzierung können getrocknete Urinsedimente wie Blutausschläge gefärbt werden (z.B. mit einer Schnellfärbung wie Diff Quick®). Die Untersuchung sollte zeitnah erfolgen, Standzeit und Lagerung müssen bei der Beurteilung berücksichtigt werden.

Eine **Konkrementanalyse** kann vom Labor durchgeführt werden, ist bei pflanzenfressenden Kleinsäugetern mit alkalischem Urin aber wenig hilfreich. Bei Kaninchen bestehen die Kristalle zu mehr als 90% aus Kalziumkarbonaten („Calcite“, Korn-, Hantel- oder Biskuitform, ► **Abb. 6**), weniger als 3% bestehen aus Kalziumphosphaten (Schollen- oder große Lattenform, Verwechslung mit Struvitkristallen möglich) und nur selten werden Kristalle aus Ammonium-Magnesium-Phosphaten (Struvit 1,2%, „Sargdeckelform“) oder Kalziumoxalaten (0,8%, briefumschlagartig [Weddelit] oder seltener zugespitzt, stabförmig [Whewellit]) nachgewiesen [7]. Bei Meerschweinchen überwiegen ebenfalls die Kalziumkarbonate, gerade bei Urethrosten scheint der Anteil an Struvit (Beteiligung von Urease-produzierenden Bakterien) aber höher zu sein [4]. Kalziumkarbonate und -oxalate können nicht in der Blase aufgelöst werden, sind nur durch Entfernung (Hydropulsion, Spülung, Zystotomie) behandelbar und dauerhaft nur durch konsequente Umstellung auf kalziumarme Fütterung und Kontrolle zu verhindern.

### Erregernachweis

Die **bakteriologische Untersuchung (BU)** des Urins dient nicht nur der Verifizierung eines positiven Bakteriennachweises auf Teststreifen oder im Sediment, sondern auch der Keimzahlbestimmung und der Keimdifferenzierung (mit Antibiotogramm zum gerichteten Antibiotikaeinsatz). Die Durchführung einer BU ist nur aus steril entnommenem Zystozenteseurin (Versand in sterilen Röhrchen mit Stabilisator) sinnvoll. Bei Verwendung von kontaminier-

tem Urin, falscher Lagerung und/oder langem Transport sind falsch-positive Befunde häufig. Falsch-negative Befunde treten während oder innerhalb von einer Woche nach antibiotischer Therapie oder Vorliegen anderer Hemmstoffe auf.

Beim Kleinsäuger gibt es nur wenige **andere Erreger**, die bei einer Infektion im Urin nachweisbar sind (z.B. Leptospiren, mikroskopisch). Selbst der Nachweis von *Encephalitozoon cuniculi*-Sporen (Kaninchen etc.) spielt gegenüber der Antikörperbestimmung im Blut (Sensitivität 96%, [6]) nur eine sehr untergeordnete Rolle, da die Sporen nur unregelmäßig beim Platzen von Tubuluszellen frei werden (falsch-negative Befunde: 60% bei Urin-PCR, 89% bei Trichromfärbung [8]).

### Klinisch-chemische Parameter

Die Bestimmung des **Urin-Protein/Kreatinin-Quotient (UPC)** wird bei Hund und Katze mit „sauberem“ Urin (kein Blut, keine Entzündungszellen etc.) zum Nachweis und zur Quantifizierung von Proteinverlust über die Nieren verwendet. Da der Urin von Kleinsäugetern aber nur sehr selten klar und ohne Beimengungen ist, ist die Aussagekraft beim Kleinsäuger extrem fraglich. Zudem liegen keine verwendbaren Referenzbereiche vor [1].

Der **Urin-Kortisol/Kreatinin-Quotient (UCC)** wird vor allem beim Hund zum Ausschluss eines Morbus Cushing verwendet. Aussagekräftige Untersuchungen und Referenzbereiche hierzu liegen bei Kleinsäugetern (Meerschweinchen, Hamster, Ratte etc.) noch nicht vor. Der Einsatz beim Frettchen ist nicht zielführend, da der hier vorliegende Hyperadrenokortizismus nicht kortisol- sondern geschlechtshormonbedingt ist.

Die Bestimmung anderer Enzymaktivitäten und Substratkonzentrationen zur Frühdiagnostik von Nierenerkrankungen ist theoretisch auch beim Kleinsäuger möglich, Studien und Referenzbereiche liegen aber bisher nicht vor.

Alle Abbildungen: © J. Hein



**Abb. 6** Polymorphe Kalziumkarbonate im Urinsediment eines Kaninchens (400×).

### Online zu finden unter

<http://dx.doi.org/10.1055/s-0035-1547402>

### Literatur

- Binder N. Referenzbereiche für Urinparameter bei Kaninchen und Meerschweinchen [Dissertation]. München: LMU München; 2010
- Buss SL, Bordeaux JE. Calcium balance in laboratory rabbits. Miner Electrolyte Metab 1984; 10 (2): 127-132
- Campbell TW. Mammalian hematology: Laboratory animals and miscellaneous species. In: Thrall MA, Weiser G, Allison R, Campbell TW. Veterinary hematology and clinical chemistry. 2nd Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012: 211-131
- Fehr M, Rappold S. Harnsteinbildung bei 20 Meerschweinchen. Tierarztl Prax 1997; 25: 543-547
- Harcourt-Brown FM, Harcourt-Brown S. Clinical value of blood glucose measurement in pet rabbits. Vet Rec 2012; 170 (26): 674
- Hein J, Flock U, Sauter-Louis C, Hartmann K. Encephalitozoon cuniculi in rabbits in Germany – prevalence and sensitivity of antibody testing. Vet Rec 2014; 174 (14): 350
- Hesse A, Neiger R. Harnsteine bei Kleintieren. Stuttgart: Enke; 2008
- Jass A. Evaluierung von Liquorpunktion und PCR zur klinischen Diagnose der Encephalitozoonose beim Kaninchen [Dissertation]. München: LMU München; 2004
- Jordan J, Brunnberg L, Ewingmann A, Müller K. Klinische, radiologische und labordiagnostische Untersuchungen zur Osteodystrophia fibrosa beim Hausmeerschweinchen (*Cavia porcellus*) der Züchtung „satin“. Kleintierprax 2009; 54: 5-13
- Moritz A, Schwendenwein I, Kraft W. Harnapparat. In: Kraft W, Dürr UM, Hrsg. Klinische Labordiagnostik in der Tiermedizin. 7. Aufl. Stuttgart: Schattauer; 2014: 420-487

Tab. 3 Urin: tierartspezifische Besonderheiten (Werte aus [4, 7, 11]).

Parameter	Kaninchen	Meerschweinchen	Chinchilla	Frettchen (Stinktief)	Kleinnager
Farbe	hellgelb bis rotbraun (Pigmente)	gelb bis rotbraun (Pigmente)	gelb	gelb	hellgelb-gelb
Trübung	klar bis leicht trüb	klar bis leicht trüb	klar bis leicht trüb	klar	klar
USG	> 1016 (isostenurischer Bereich: 1008–1016)	> 1016	> 1016	> 1016	> 1016 (Wüstenrennmaus u. Hamster meist > 1040)
pH-Wert	7,5–9,0 (8,25)	8,0–9,0 (8,5)	8,0–9,0	6,5–7,5	Maus, Ratte: 5–7 Hamster, Gerbil: 6–8 (nahrungsabhängig)
Kristalle	> 90% Kalziumkarbonate	v. a. Kalziumkarbonate	selten (Ca-Ausscheidung v. a. über Darm)	v. a. Struvit	selten Struvit

11 Quesenberry KE, Orcutt C. Ferrets – Basic approach to veterinary care. In: Quesenberry KE, Carpenter JW, eds. Ferrets, Rabbits, and Rodents: Clinical Medicine and Surgery. 3rd ed. St. Louis: Elsevier; 2012: 13–26

12 Vella D, Donnelly TM. Rabbits – Basic Anatomy, Physiology, and Husbandry. In: Quesenberry KE, Carpenter JW, eds. Ferrets, Rabbits, and Rodents: Clinical Medicine and Surgery. 3rd ed. St. Louis: Elsevier; 2012: 157–173

#### Dr. Jutta Hein

Diplomate ECZM (Small Mammal)  
Zbz. Heimtiere/Kleinsäuger  
Kleintierklinik Augsburg, synlab.vet Augsburg  
www.heimtieraerztin.de

Anzeige

# Willkommen auf unserer Website!

**WDT**   
Das Tierarztunternehmen.




[www.korvimin-zvt.de](http://www.korvimin-zvt.de) 

Hier finden interessierte Ziervogel- und Reptilien-Besitzer weit mehr als eine detaillierte Produktbeschreibung. Wertvolle Informationen zur Ernährung und Haltung laden zum Lesen und Stöbern ein.

Korvimin® ZVT+Reptil – von Tierärzten entwickelt, millionenfach bewährt.

Autoren-PDF

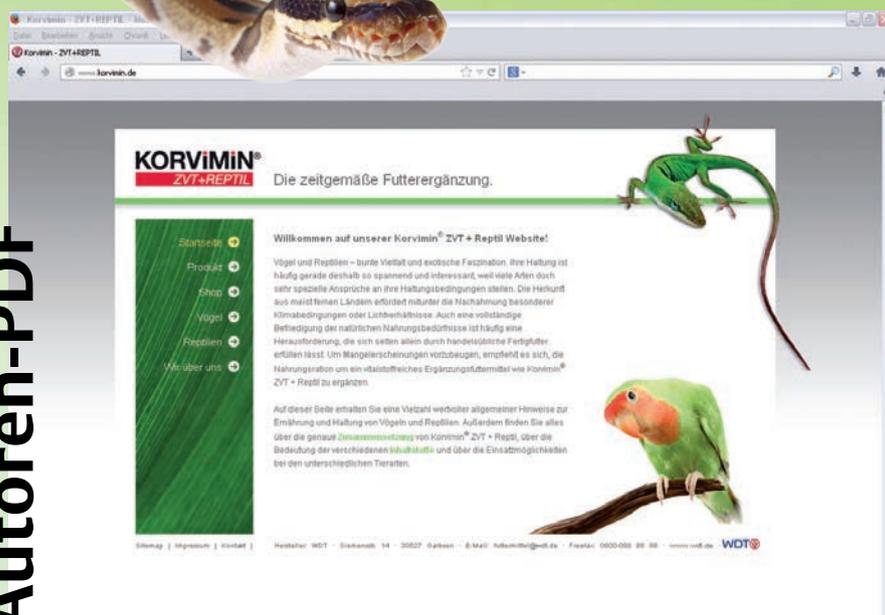

**KORVIMIN®**  
ZVT+REPTIL

Die zeitgemäße Futterergänzung.

Willkommen auf unserer Korvimin® ZVT+Reptil Website!

Vögel und Reptilien – bunte Vielfalt und exotische Faszination. Ihre Haltung ist häufig gerade deshalb so spannend und interessant, weil viele Arten doch sehr spezielle Ansprüche an ihre Haltungsbedingungen stellen. Die Herkunft aus meist fernen Ländern erfordert natürlich die Nachahmung besonderer Klimabedingungen oder Lichtverhältnisse. Auch eine vollständige Befriedigung der natürlichen Nahrungsbedürfnisse ist häufig eine Herausforderung, die sich selten allein durch handelsübliche Fertigfuttermittel lösen lässt. Um Mangelerscheinungen vorzubeugen, empfiehlt es sich, die Nahrungsergänzung um ein vitalstoffreiches Ergänzungsfuttermittel wie Korvimin® ZVT+Reptil zu ergänzen.

Auf dieser Seite erhalten Sie eine Vielzahl wertvoller allgemeiner Hinweise zur Ernährung und Haltung von Vögeln und Reptilien. Außerdem finden Sie alles über die genaue Zusammensetzung von Korvimin® ZVT+Reptil, über die Bedeutung der verschiedenen Substanzen und über die Einsatzmöglichkeiten bei den unterschiedlichen Tierarten.

Über uns | Impressum | Kontakt | Newsletter WDT - DieKleintier 14 - 20227 Gießen - E-Mail: [Info@korvimin.de](mailto:Info@korvimin.de) - Telefon: 0660-080 88 88 - [www.wdt.de](http://www.wdt.de) WDT